

HALYARD* Steriliserings packskynken



DIN PÅLITLIGA PARTNER INOM STERILISERING

Skydd • Säkerhet • Användarvänlighet




DIN PÅLITLIGA PARTNER INOM STERILISERING

När det kommer till sterila galler, innebär bibehållen sterilitet skydd av er patient. HALYARD packskynken är det mest validerade förpackningsmaterialet på marknaden, som tillför den pålitliga lösning som ni behöver för det optimala patientomhändertagandet och skyddet.

SKYDD VIA STYRKA

HALYARD* sterila packskynken är gjorda av polypropylen med hjälp av en tre-skikt (Spunbond-Meltblown-Spunbond) process; de yttre skikten av HALYARD ONE-STEP* steriliseringsomslag ger exceptionell styrka och hållbarhet. Det inre multilagret av Meltblown fibrer ger en optimal barriär mot bakterier och vätskor samtidigt som man tillåter penetration av gas steriliseringsmedel (ånga, etylenoxid, formaldehyd och plasma).

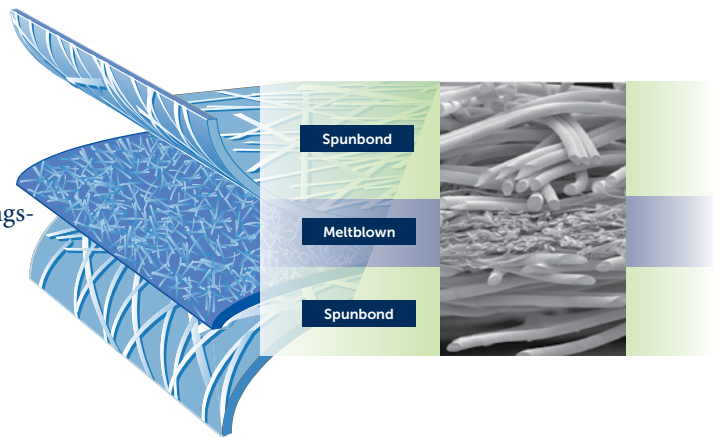

SKYDD VIA EN OPTIMAL BAKTERIEBARRIÄR

Materialet i HALYARD* sterila packskynken är behandlat med den unika patenterade POWERGUARD* teknologin. Den patenterade processen behandlar materialet i packskynket med ett unikt elektrisk mikrofält som omger fibrerna. Detta varierande nätverk av laddade fibrer bildar gradienter i vävstrukturen, som möjliggör effektiv mikrobiell avskiljning och lagring, nödvändigt för att förhindra fibrernas frisättning av infångade föroreningar över tid. Den patenterade POWERGUARD* behandlingen upprätthåller höga avskiljnings- och retentionsegenskaper genom sterilisering, hantering och förvaring.



Flegångsmaterial

Packskyne i SMS

HALYARD ONE-STEP*
H400

Bilderna illustrerar effekten av POWERGUARD* på sterila barriärmaterial efter BFE-tester (ASTM F2101): plattorna har täckts på motsvarande sätt med flegångsmaterial steriliseringsomslag, två lager av SMS steriliseringsomslag, och HALYARD ONE-STEP* H400. De materialförsedda plattorna provocerades med Staphylococcus aureus bakterier. Efter tjugofyra timmar togs omslaget bort och CFU räknades för att bestämma antalet bakterier som trängt igenom de olika steriliseringsmaterialen.

PÅLITLIGHET

Samtliga HALYARD® steriliserings packskynken är CE-märkta och certifierade enligt EN ISO 11607-1:2009/A1:2014 och testade enligt EN 868-2. Förutom att vara starka och ha en utmärkt barriärstyrka så är HALYARD® packskynken:


- Luddfria
- Vattentåliga
- Draperbar
- Testad för händelserelaterad sterilitetsbevarande
- Validerad med de mest förekommande steriliseringsmetoderna
 - Låg temperatur:
 - STERRAD® Sterilisation System
 - STERIS® Sterilisation System
 - Pre-vacuum Steam
 - Gravity Steam sterilisation
 - Formaldehyde sterilisation
 - Ethylene Oxide (EO)

ANVÄNDARVÄNLIGHET



Inom Halyard, anser vi att det bör finnas ett packskynke tillgängligt för varje behov och vid varje tillfälle. HALYARD®s portfölj av steriliserings packskynken erbjuder:

- HALYARD® Sekventiellt steriliserings packskynke: enkla skynken av POWERGUARD®-behandlad SMS för sekventiell vikning
- HALYARD ONE-STEP® steriliserings packskynke: 2-lager av POWERGUARD®-behandlad SMS termiskt förslutet längs kanterna för att erbjuda en enkel vikning som ger en tidsbesparing upp till 49%.
- HALYARD® QUICK CHECK® Steriliserings packskynke: en POWERGUARD®-behandlad ONE-STEP® produkt med ett blått och ett vitt lager, som gör det enklare att upptäcka om steriliteten är bruten.

Alla HALYARD® sterila produkter finns i olika storlekar och styrkor anpassat för storlek och vikt på det galler som ska paketeras.

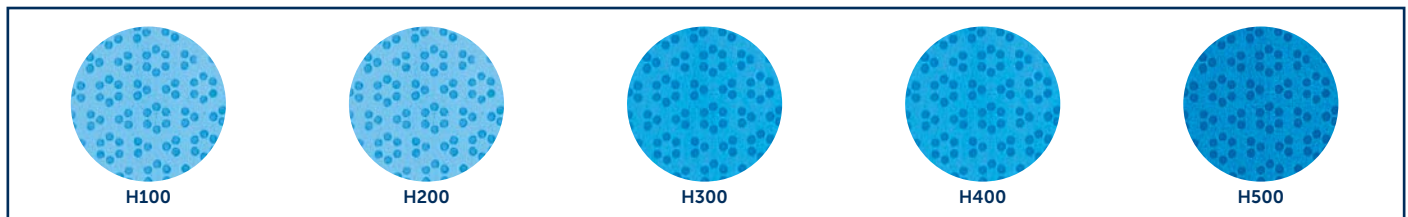

ANVÄNDARVÄNLIGHET: DUBBELDRAPERAT SKYDD PÅ HALVA TIDEN

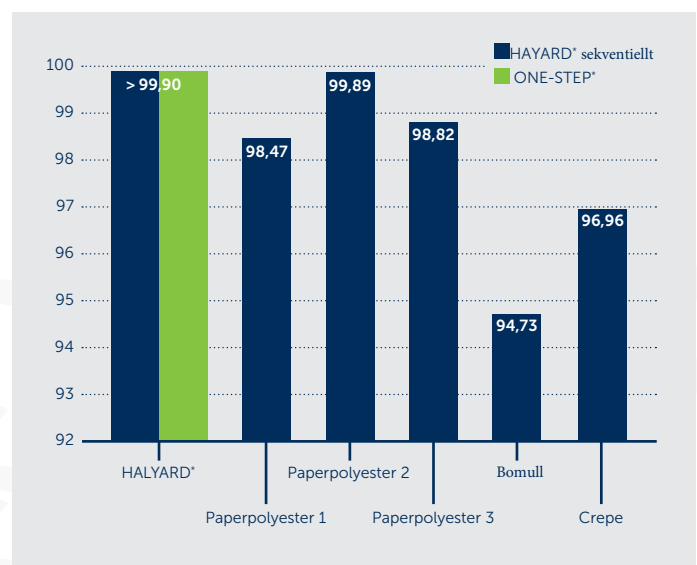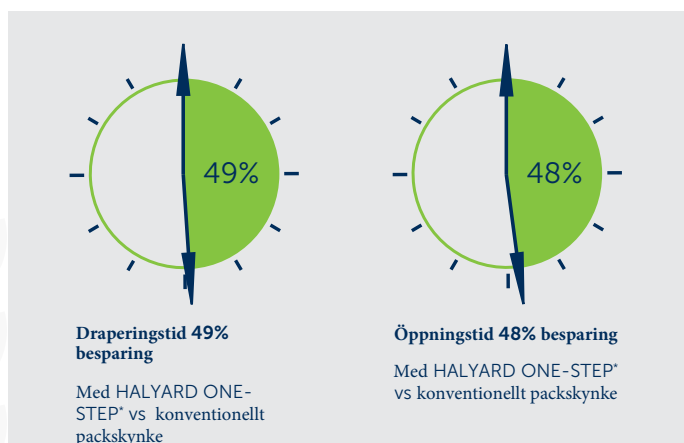

- HALYARD ONE-STEP® och HALYARD® QUICK CHECK® steriliserings packskynke erbjuder enstegs drapering. Studier gjorda av Kurt-Salmon Associates visar en tidsbesparing med 49% vid vikning och en tidsbesparing med 48% vid öppning.

- Barriärskyddet är likvärdig som vid förpackning med 2 enkla packskynken vilket bevisas av TNO^{4,5}.

HALYARD* Steriliserings packskynken

ANVÄNDARVÄNLIGHET GENOM FÖRVARINGSOPTIMERING

HALYARD* steriliserings packskynken kräver minimal förvaringsyta och kombineras ofta med användandet av transportbrickor eller korgar.



HÖGKLASSISK SERVICE

I enlighet med Halyard Health* Mission Statement är målet att erbjuda kliniskt överlägsna produkter och enastående service för att främja hälsa och sjukvård över hela världen

Vår Halyard distributör har glädjen att:

- Genomföra en översyn av systemen på er avdelning för att identifiera områden som kan erbjuda potentiella besparingar och / eller effektivitetsvinster
- Organisera HALYARD* tester av våra produkter och erbjuda in-service support
- Föreslå transportlogistiska lösningar
- Erbjuder träning och support på de centrala steriltekniska avdelningarna.

Reference: 1. Data on file Halyard Health. 2. US patent 5.998.308, December 7, 1999. 3. Study Kurt Salmon Associates. 4. TNO report, May 1999, Determination of the microbial barrier properties of twelve types of packaging material according to the Final Pack Method. 5. TNO report, V6412 April 2005, Determination of the microbial barrier properties of thirty types of packaging material from Kimberly-Clark, according to the Final Pack Method.



KUNSKAPSNÄTVERK Klinisk utbildning.
Kunnig Kundsupport.
Professionell Säljkår.
Verktyg och Bästa tillämpning .
Klinisk forskning,
Engagemang för kvalitet.

Halyard Health är en medicinteknisk koncern fokuserad på att förhindra infektion, att eliminera smärta och ge snabbare återhämtning. Halyard Healths produkter är kliniskt överlägsna och erbjuder bästa tänkbara service för att främja hälsa och sjukvård över hela världen.

För mer information, vänligen skicka e-post till customerservice.uk.ie@hyh.com eller besök www.halyardhealth.co.uk.

VINGMED



The pictures on the front and back covers are used with the permission of BELINTRA - www.belintra.com